

Inteligentna Szczoteczka Soniczna Dla Dzieci

Instrukcja Obsługi



Funkcje Produktu

1. bezprzewodowe ładowanie:

Czas ładowania jest krótszy niż 120 minut, po naładowaniu, może trwać dłużej niż jeden tydzień, oszczędzając energię i przyjazne dla środowiska.

2. wygodny w użyciu:

Prosta obsługa, cztery opcje trybu: A, mocny szczotkowanie B, wygodne szczotkowanie C, masaż wysokiej częstotliwości D, wybielanie zębów

3. szczotkować zęby we wszystkich kierunkach:

Po włączeniu przełącznika , trwa tylko 45 sekund, aby ukończyć

360-stopniowa szczotkowanie akcji. (45 sekundy automatyczne zatrzymanie)

4. Automatyczna funkcja pamięci:

Inteligentne nawyki użytkownika sklepu-wydajne i wygodne.

5. Trzy w jednym funkcje szczotkowania, masażu i wybielania zębów.

Cechy Produktu


1 ten produkt przyjmuje cały okrągły wodoodporny projekt uszczelnienia, LPX7-wygodny, trwały i czysty

2 Konstrukcja głowicy szczoteczki w kształcie litery U, z zastosowaniem silikonowego antybakteryjnego klasy spożywczej materiału, 360 stopni kontaktu z dziąsłami i zębami.

Szczotkowanie zębów i przynosi Quick i wygodne doświadczenie do ust za każdym razem.

3 zastosowanie tego produktu może zapobiec recesji dziąseł, promować krążenie przyzębia i zmniejszyć występowania choroby przyzębia.

Opis produktu:

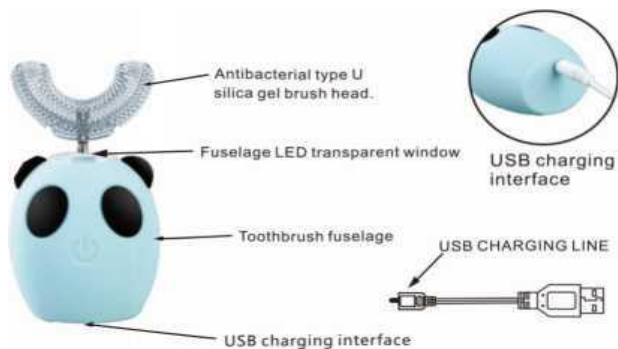

2. Opis ładowania

Po pierwsze, małe USB na jednym końcu linii danych USB jest włożony do gniazda wtyku chargingbase, a drugi koniec jest podłączony do zasilacza USB.

Następnie mainframe jest umieszczony pionowo na wgłębienia podstawy ładowania do ładowania.

O gdy elektroda kadłuba jest w dobrym kontakcie z podstawą ładowania, lampka kontrolna podstawy ładowania świeci się, gdy dioda nie świeci się lub zacznie migać w pokerze , że kadłud nie jest dobrze umieszczony, należy go wymienić.

© Ładowanie, dioda LED kadłuba błyszcząca, Pełna światła.

3. Parametry Produktu

Rozmiar produktu	110x50x45mm	Waga produktu	92G ± 10g
Napięcie znamionowe	3.2-3.7 v	Moc znamionowa	< 5W
Prąd roboczy	< 1,6 A	Czas ładowania	< 120Minute

Sposób użycia

1 > równoległe do korpusu i wyrównać otwór z wału napędowego i umieścić go w miejscu 2, produkt ten może używać płynnych pasty do zębów lub zwykłej pasty do zębów

3 ' podczas korzystania ze zwykłej pasty do zębów, trzeba zwilżyć szelki, a następnie umieścić je w ustach, niech górne i dolne zęby delikatnie pasują do wyrostka zębowego , i włączyć przełącznik, wstrząsną rękę dotknąć lewego i prawego zębów, najlepsza częstotliwość jest 63 razy i minut, wygodny i szybki proces czyszczenia zębów może być zakończona w 45 sekund. Nawiasy klamrowe mogą być modyfikowane w zależności od długości.

4 > oczyścić szelki i ciało, szelki z Płukanie wodą, użyj suchej szmatki do wycierania kadłuba.

Uwagi

1 normalna temperatura robocza produktu wynosi 0⁰ c-50⁰ c.

2 podczas ładowania ProDuct, ze względu na charakterystykę produktu, należy ładować w temperaturze pokojowej.

3 Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie i rozładowanie raz w ciągu trzech miesięcy.

4 produkt powinien być przechowywany w suchym, chłodnym miejscu, unikając słońca.

5. po szczotkowanie zębów, należy użyć wilgotną szmatką do wyschnięcia wody i stagnacji wody na ciele, i starają się unikać być pojawiły się w wodzie.

6 produkt ma dużą moc wyjściową, nie działają przez długi czas. Zazwyczaj mniej niż 10 minut.

7. podczas ładowania należy zachować suchość ciała. Zasilacz jest 5V0. 5a do 5v1a ładowania zasilania.

8 obraz jest tylko do celów informacyjnych, należy oprzeć się na produkcie fizycznym

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.



Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

IMPORTER:

MK Company Maciej Kusaj
Ul. Hutników 14F
42-202 Częstochowa
Polska
NIP: 9492052377
Tel.: +48 739566524
www.abcros.pl



*Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi i podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.